


Frame runner

ASSISTIVE DEVICE FOR RUNNING

跑步三輪車

ING-Cod 220810 - 06.11.24

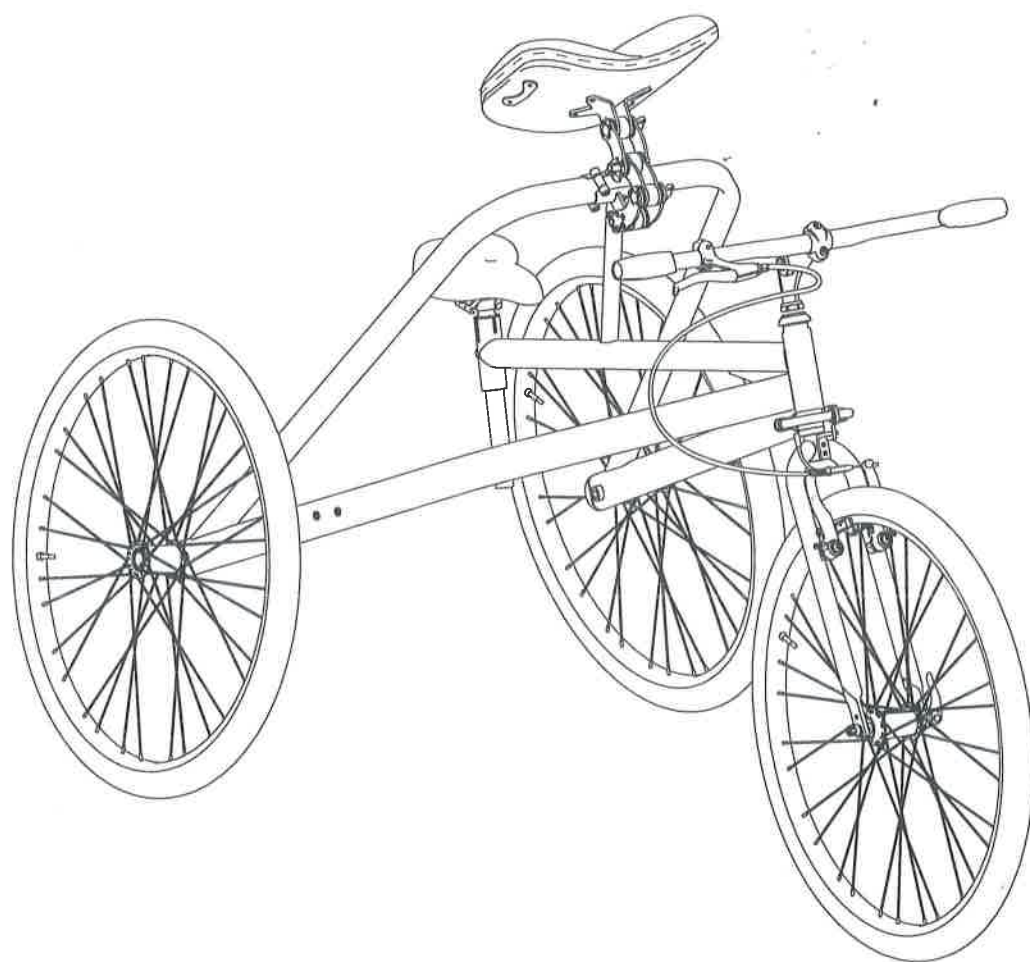

CE

上和勤實業有限公司

ORMESA®




• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

操作使用手冊



軀幹支撐調整



- 1) 鬆開蝶帽
- 2) 調整軀幹支撐並旋緊蝶帽

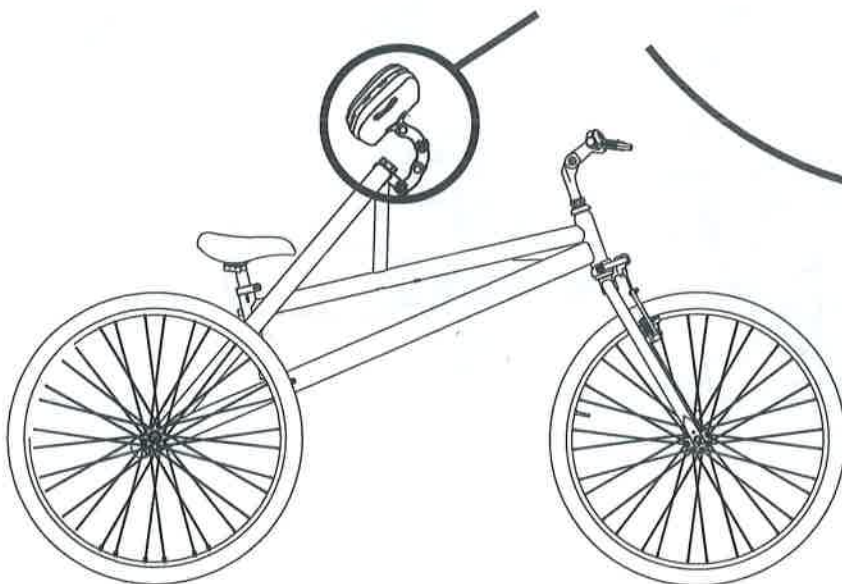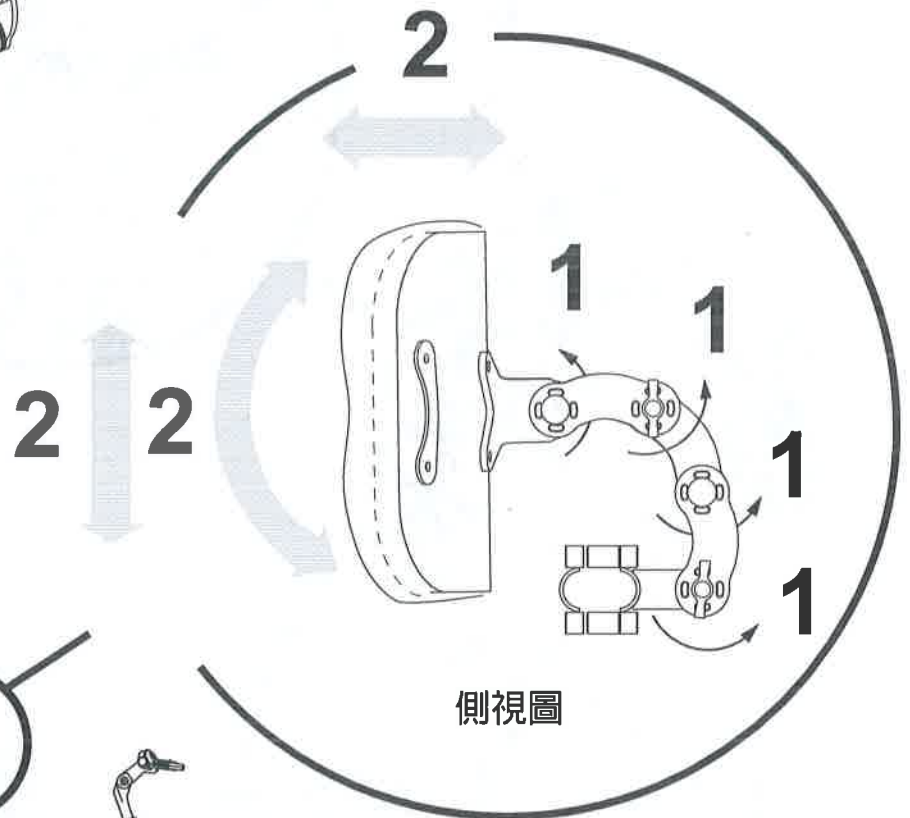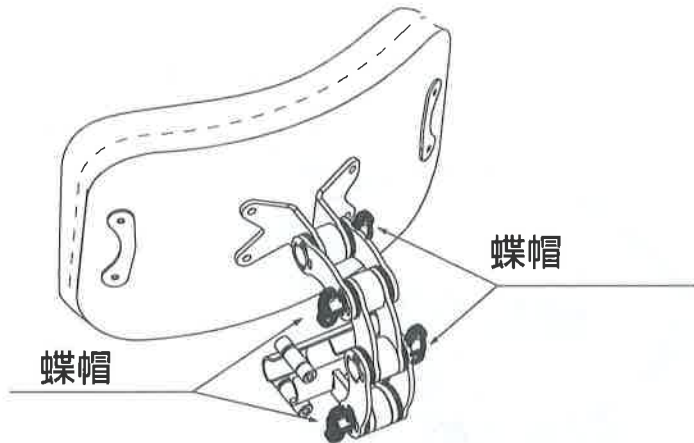



剎車桿調整



- 1) 調整剎車桿前，請先鬆開電纜螺絲
- 2) 旋緊直到剎車桿位於所需位置
- 3) 旋緊電纜螺絲，調整剎車

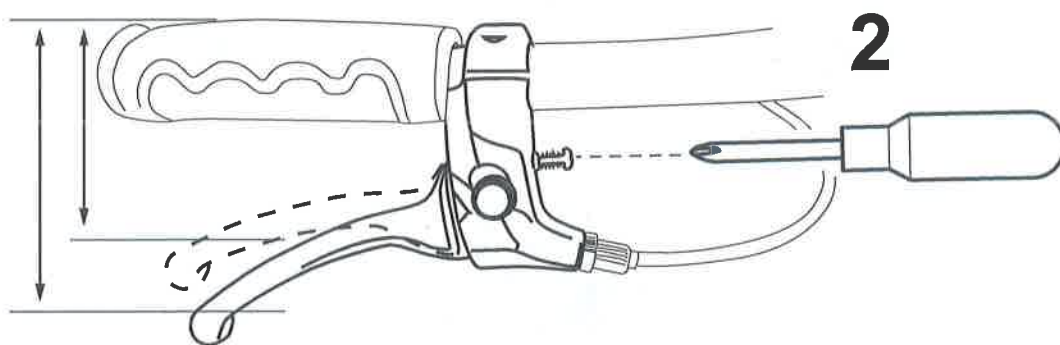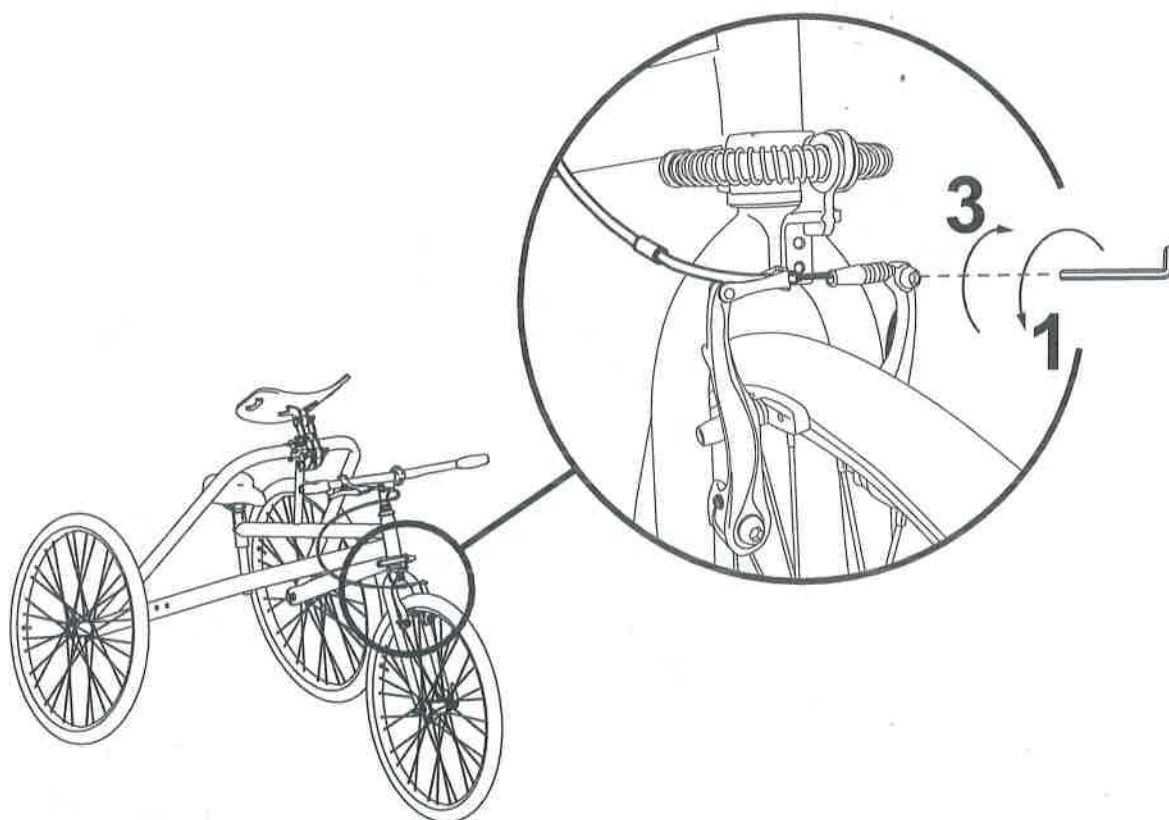



拆卸彈簧轉向限制器


- 1) 鬆開兩個螺栓
- 2) 拆卸轉向限制器

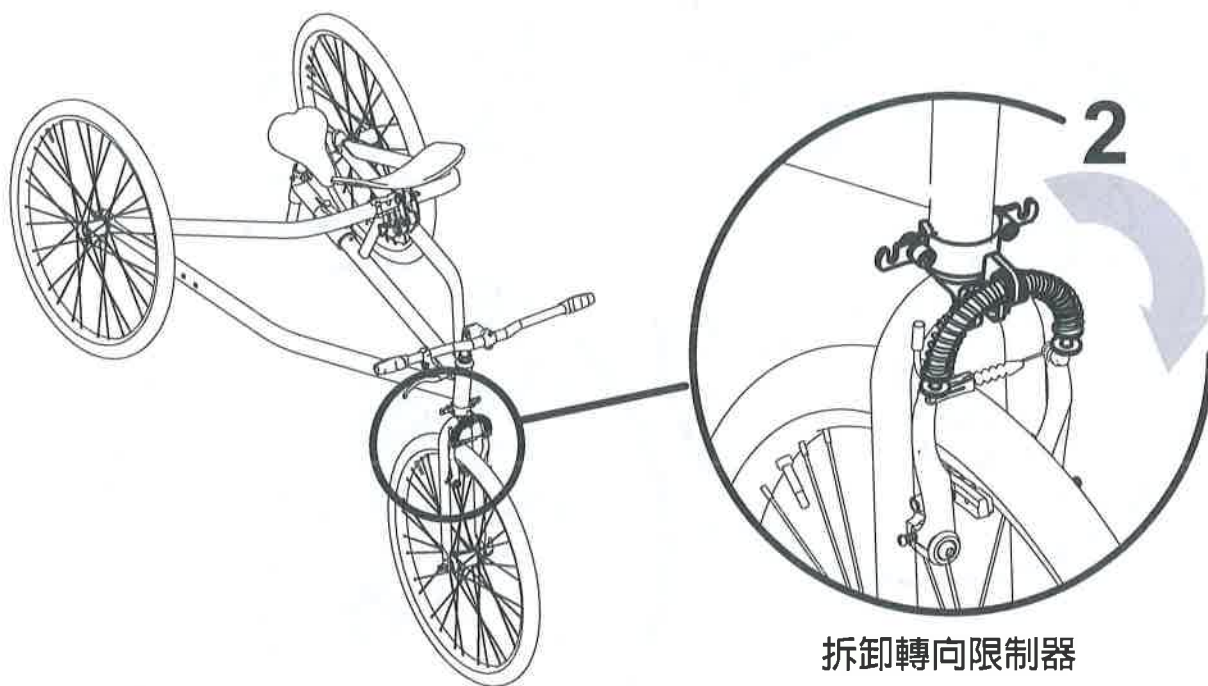
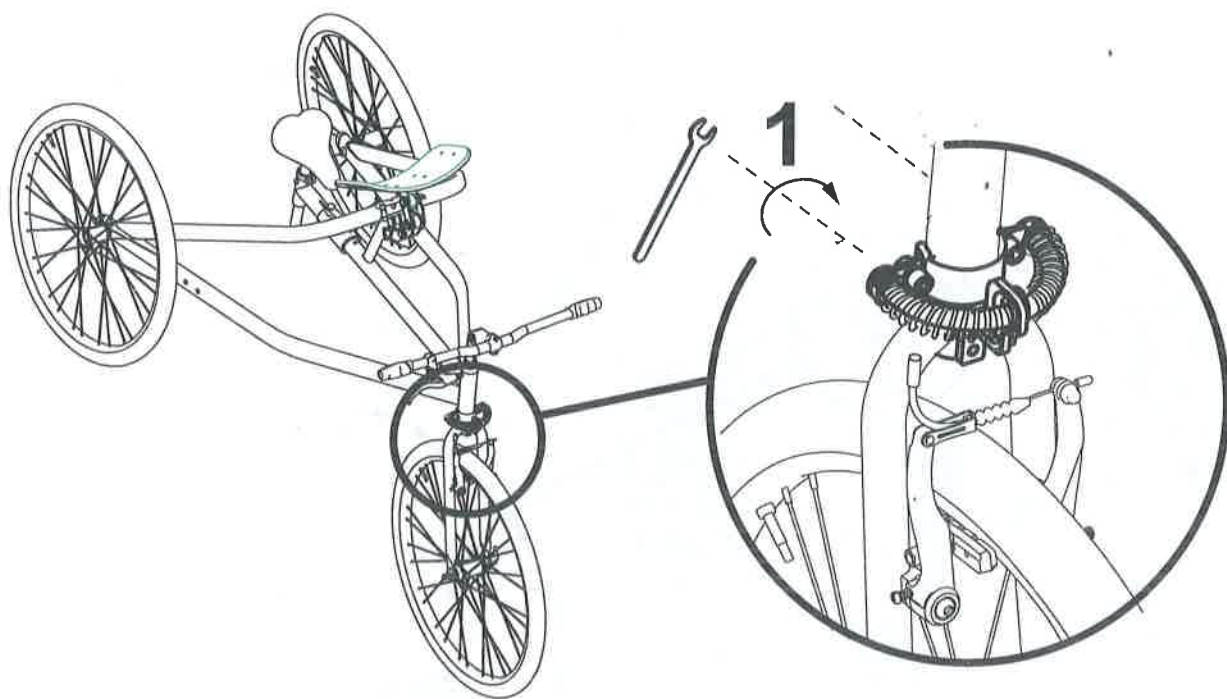




座椅下放操作


- 1) 推動橫桿，朝箭頭所示方向移動，另一隻手握住座椅。
- 2) 將座椅向下放，並釋放橫桿。
- 3) 若要將座椅返回原始位置，將其向上直到聽到「喀」的一聲，表示成功卡入位置。此時不需要再按壓橫桿。

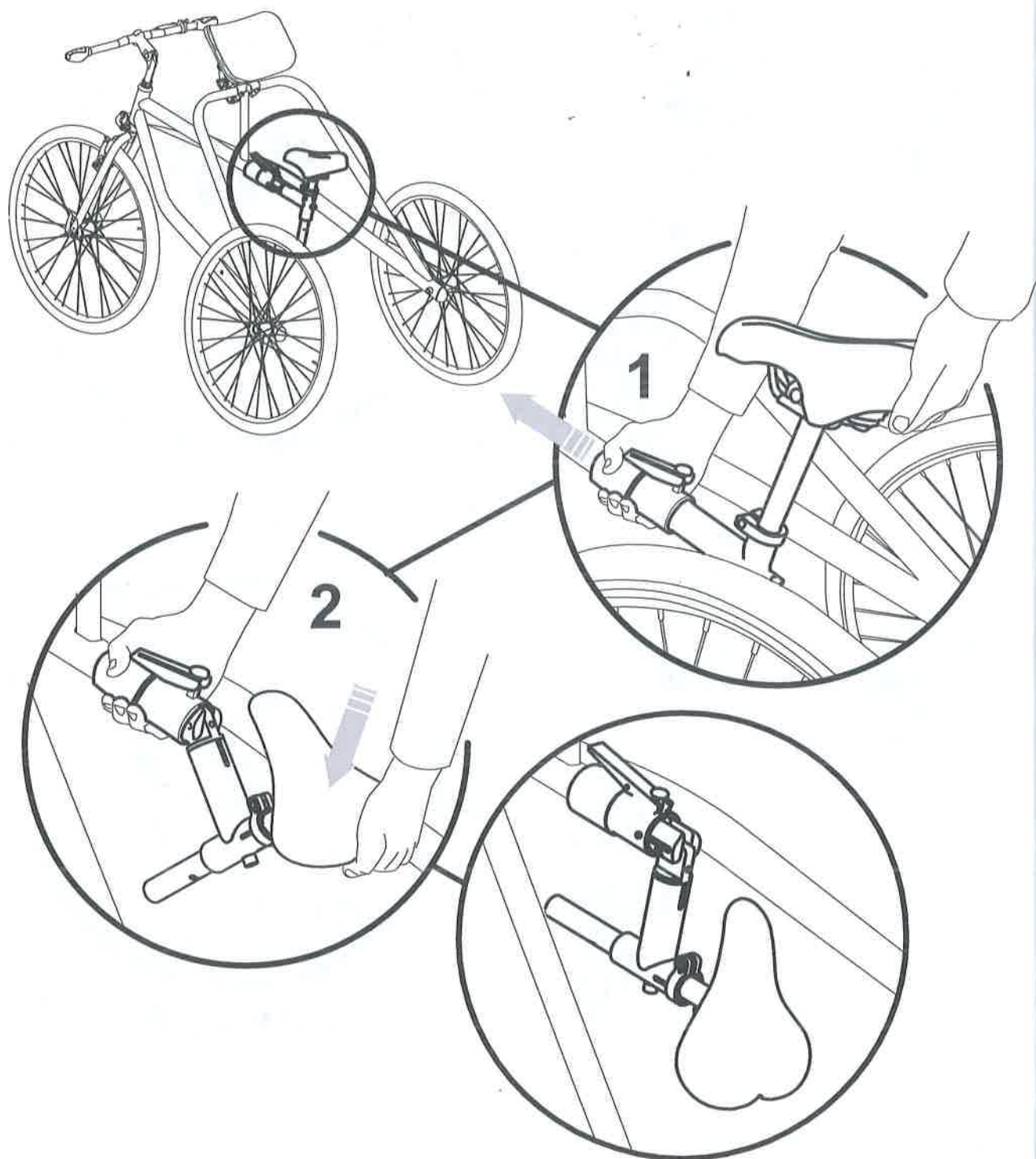

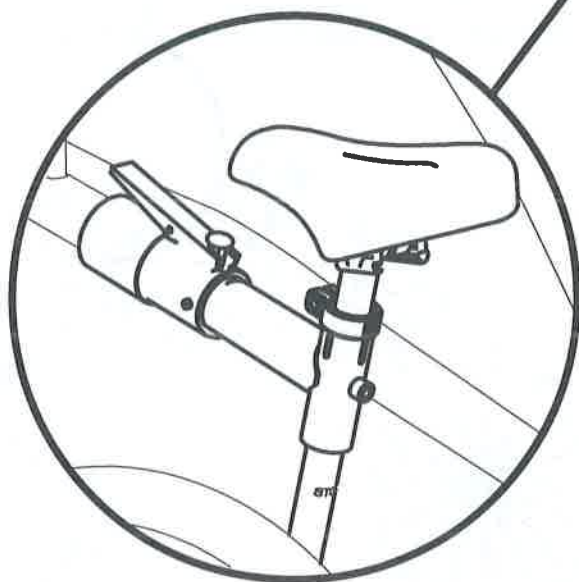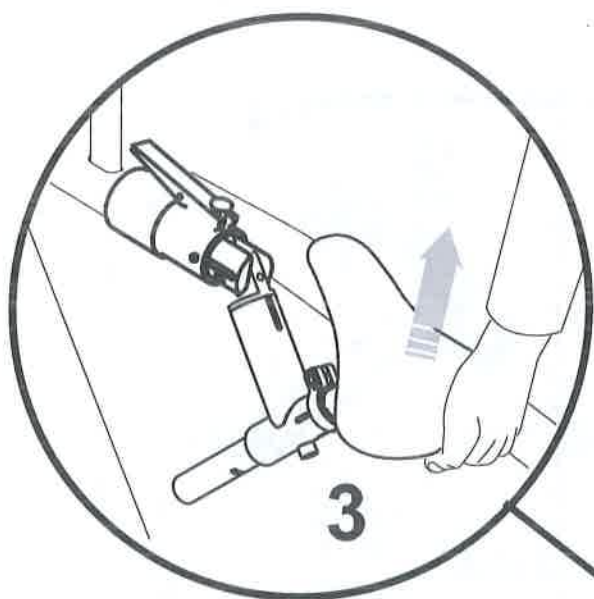



880 可調式人體工學握把

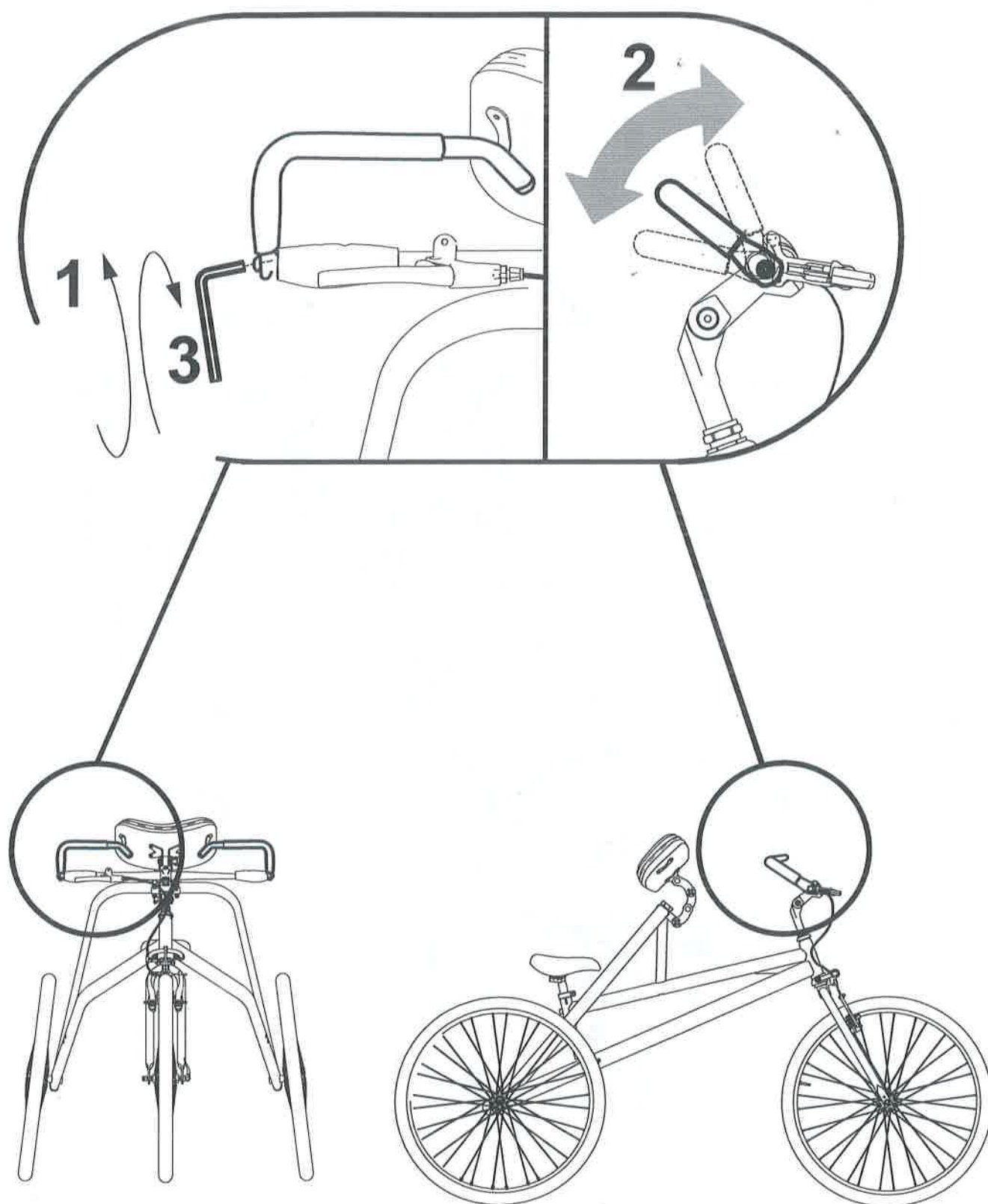




102 軀幹支撐帶

可透過魔鬼氈調整週長



俯視

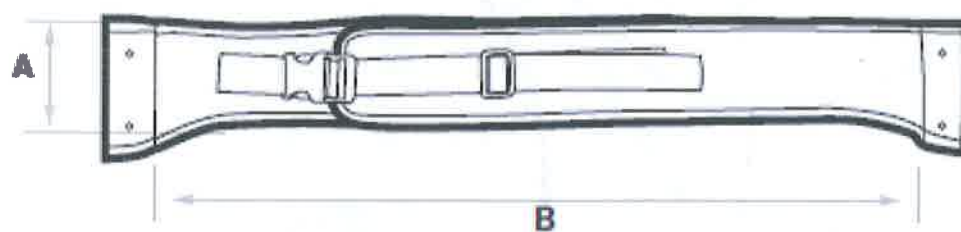

	A	B
M	8 cm	45-59 cm
L	8 cm	63,5-84 cm




876 單輪車座墊

高度、傾斜度和前後位置可調


A. 高度調整

- 1) 鬆開螺絲
- 2) 將座墊調整到所需高度
- 3) 旋緊螺絲A (達到所需高度後才可旋緊 B 螺絲)

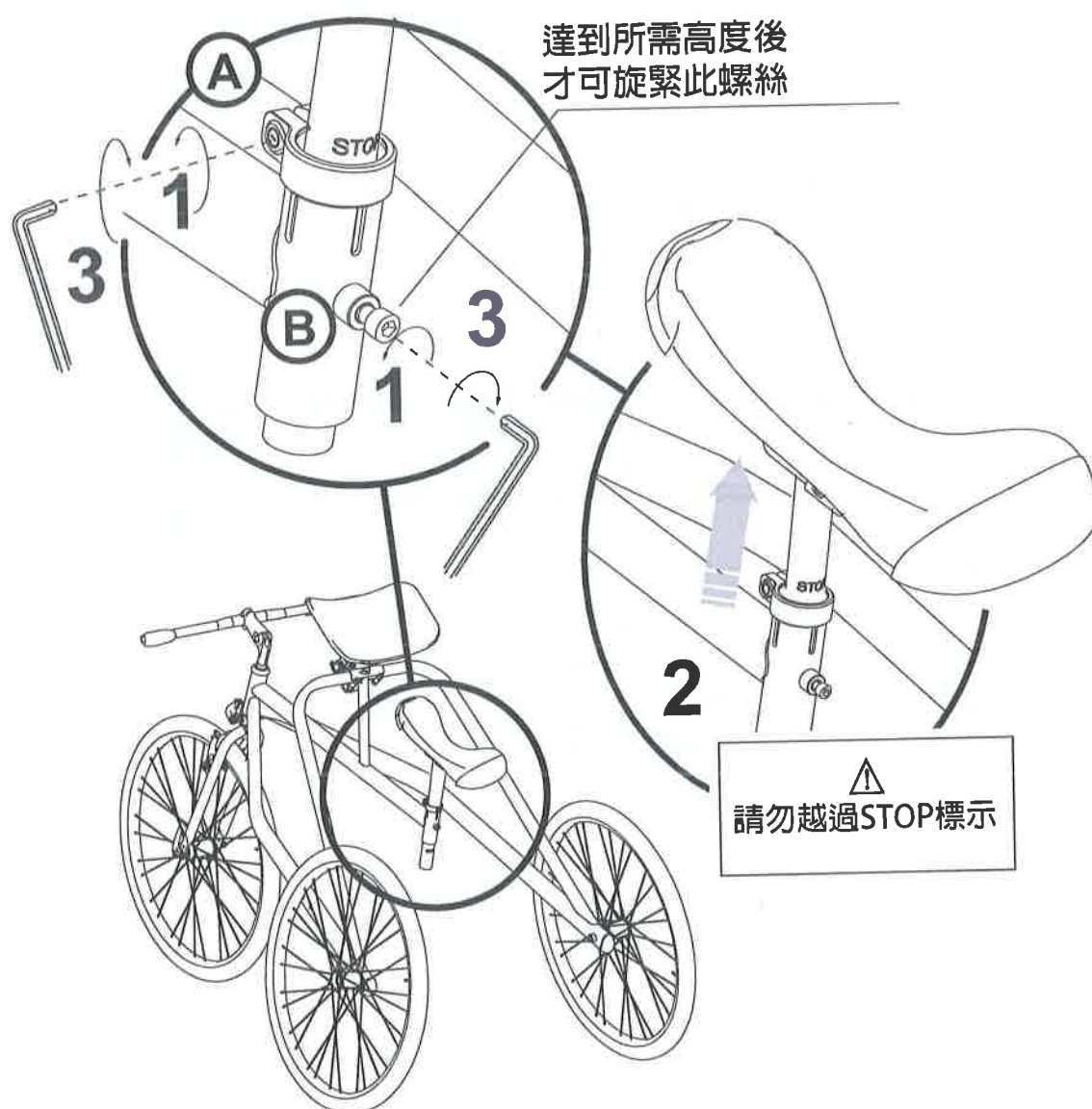




B. 傾斜度和前後位置調整

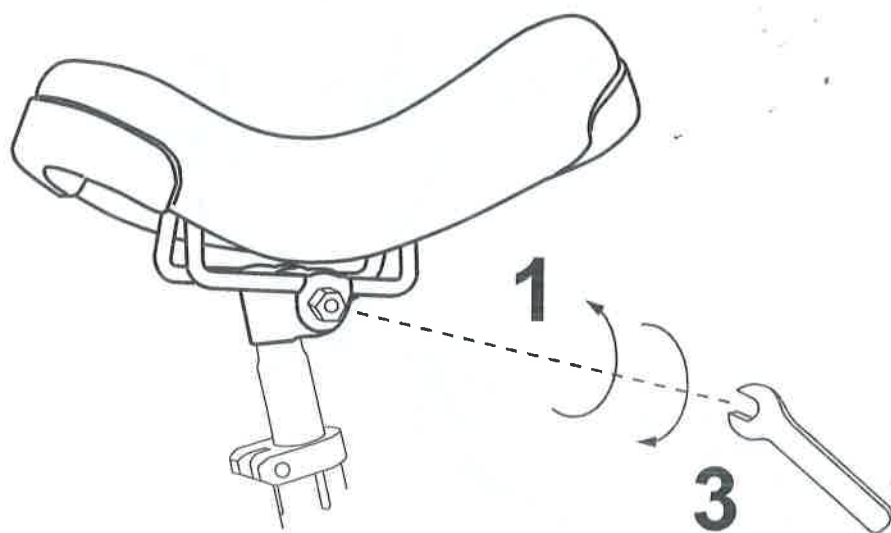



- 1) 鬆開螺栓
- 2) 調整座墊
- 3) 鎖緊螺栓並放回螺帽



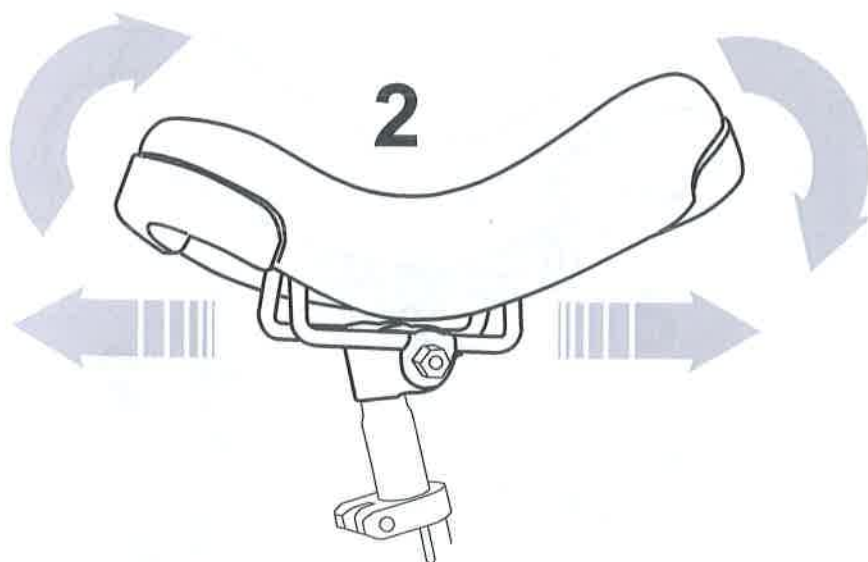






依照以下步驟可將座墊高度再降低 3 公分：


- 1) 鬆開螺栓
- 2) 從座桿上拆下座墊
- 3) 拆下螺母，拆下夾具
- 4) 將夾具旋轉180°
- 5) 將夾具安裝在座墊附件上，並輕微鎖緊螺母
- 6) 將座墊插入座桿
- 7) 鎖緊螺母

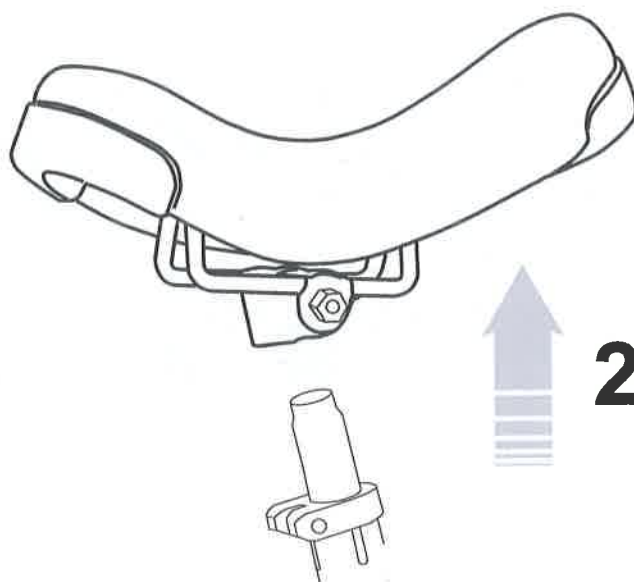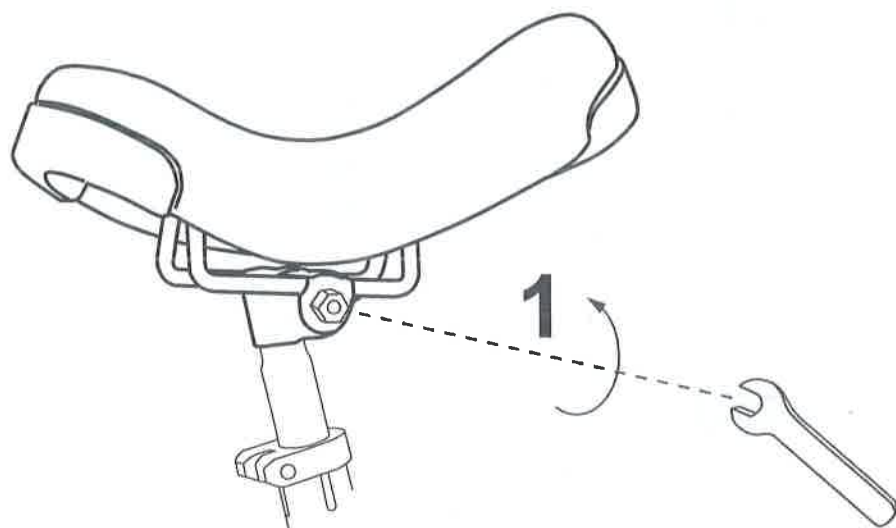

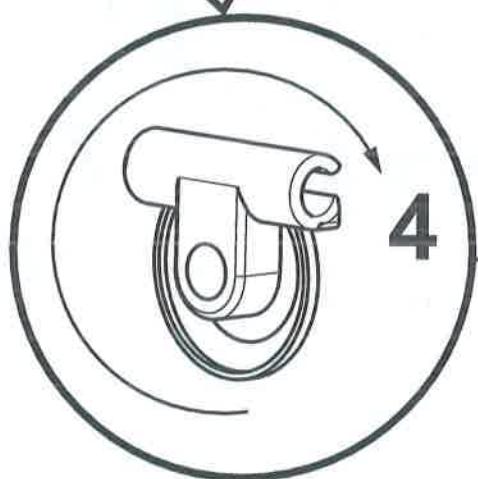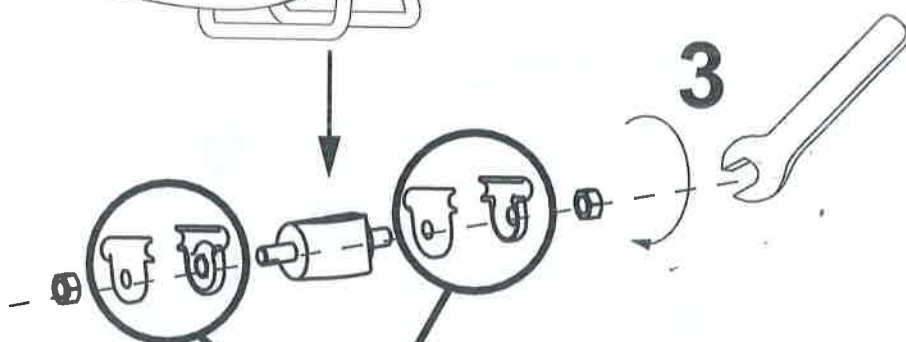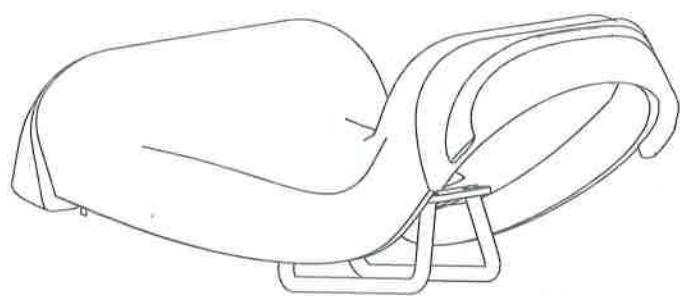


夾具旋轉180°


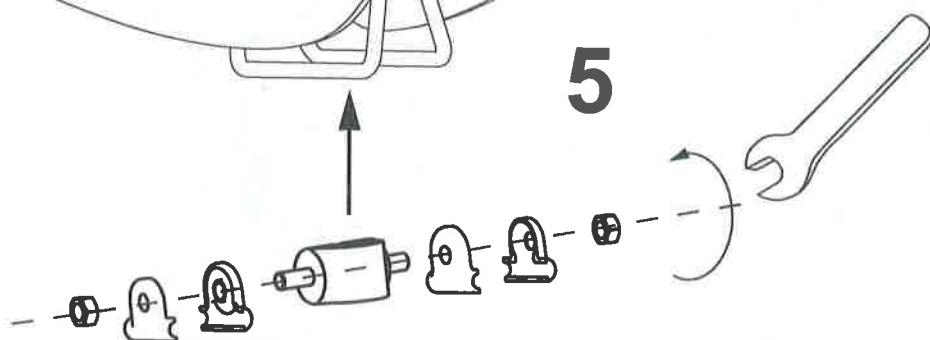
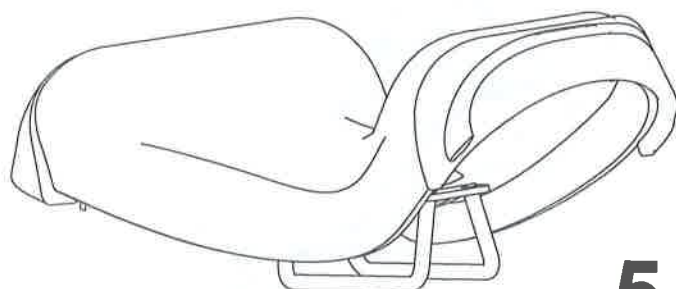


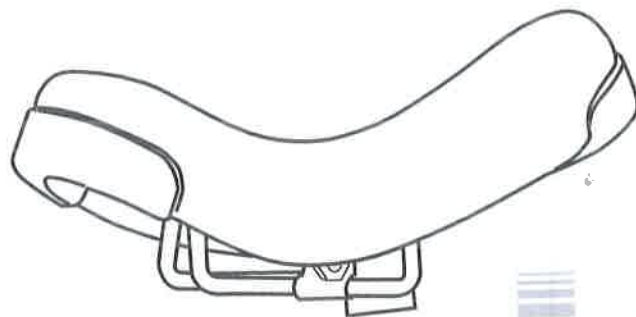

6

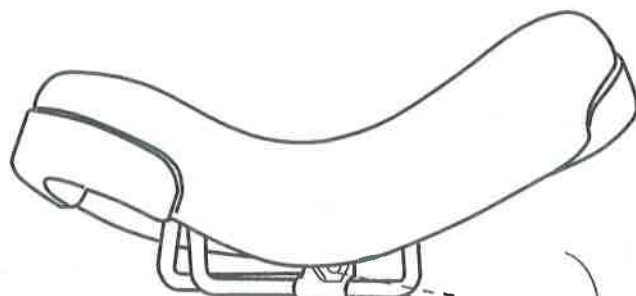


7

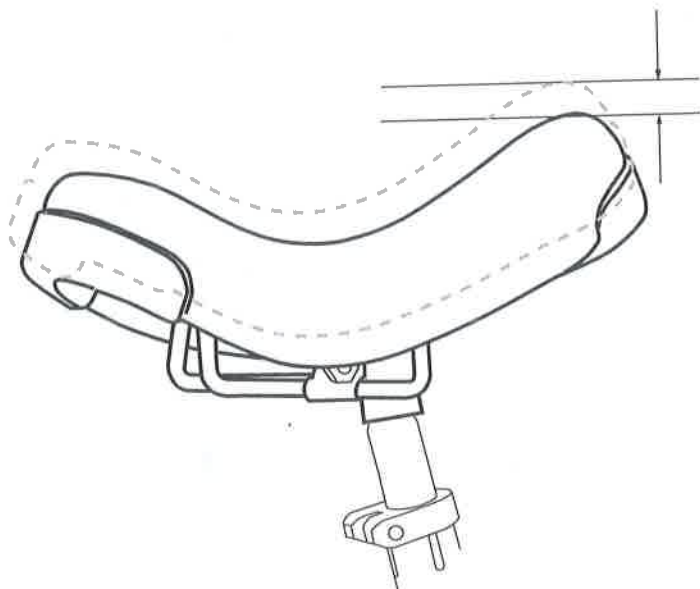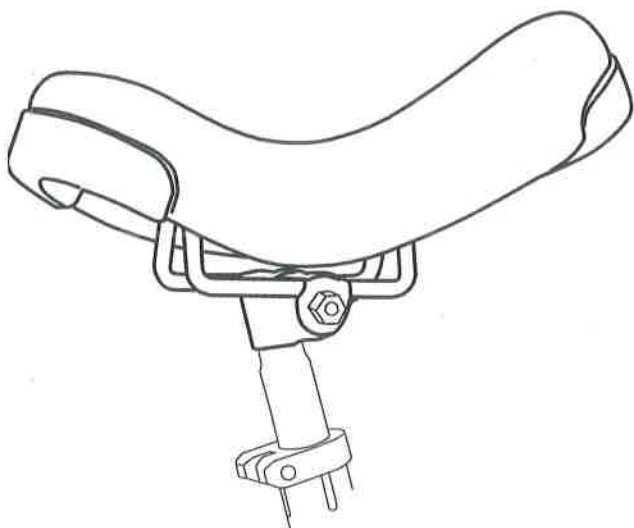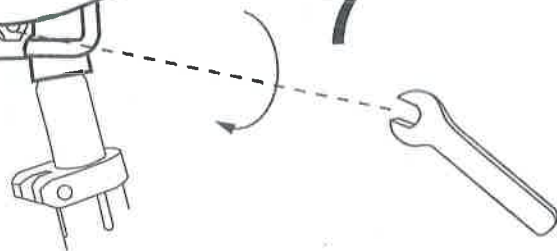




駐車煞車

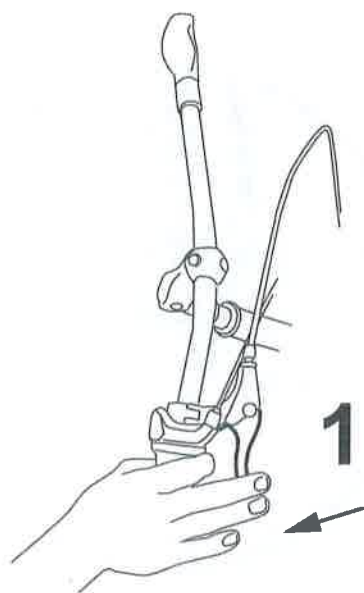


THUMB-LOCK STOPPER

2

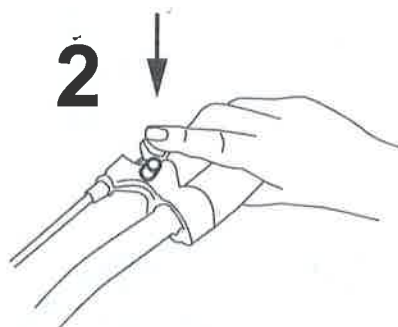

107 左右駐車煞車

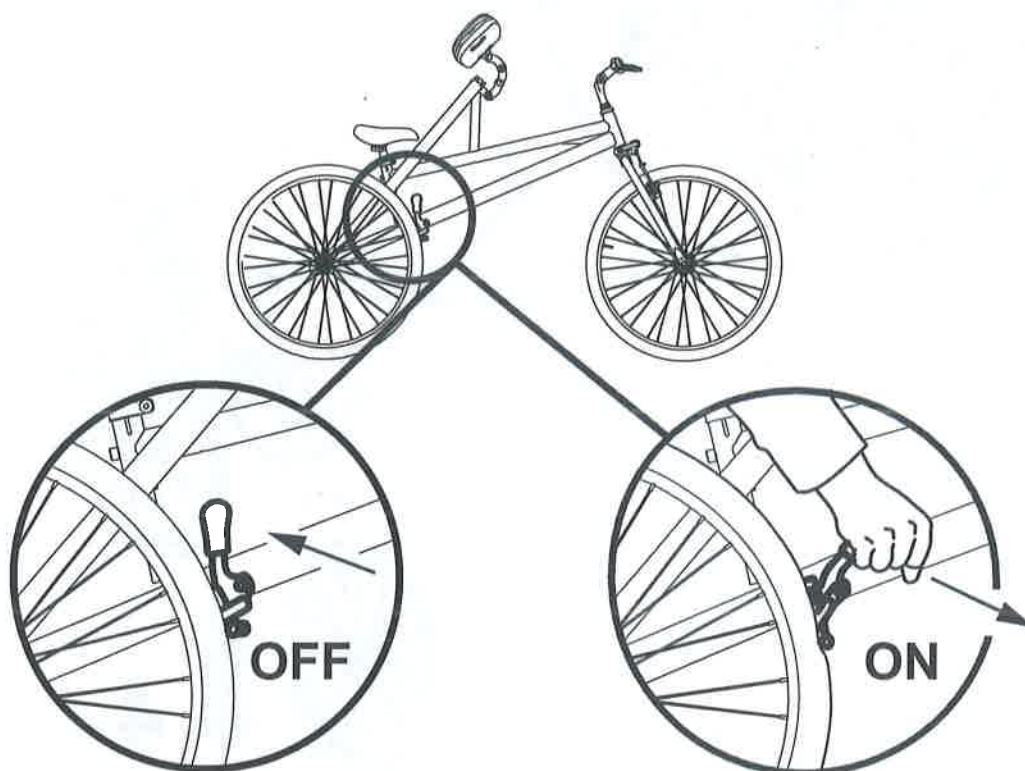




拆卸運輸

前輪拆卸


- 1) 鎖緊煞車的兩個部分，以便
- 2) 從座椅上拆下傳動線
- 3) 拆下車輪

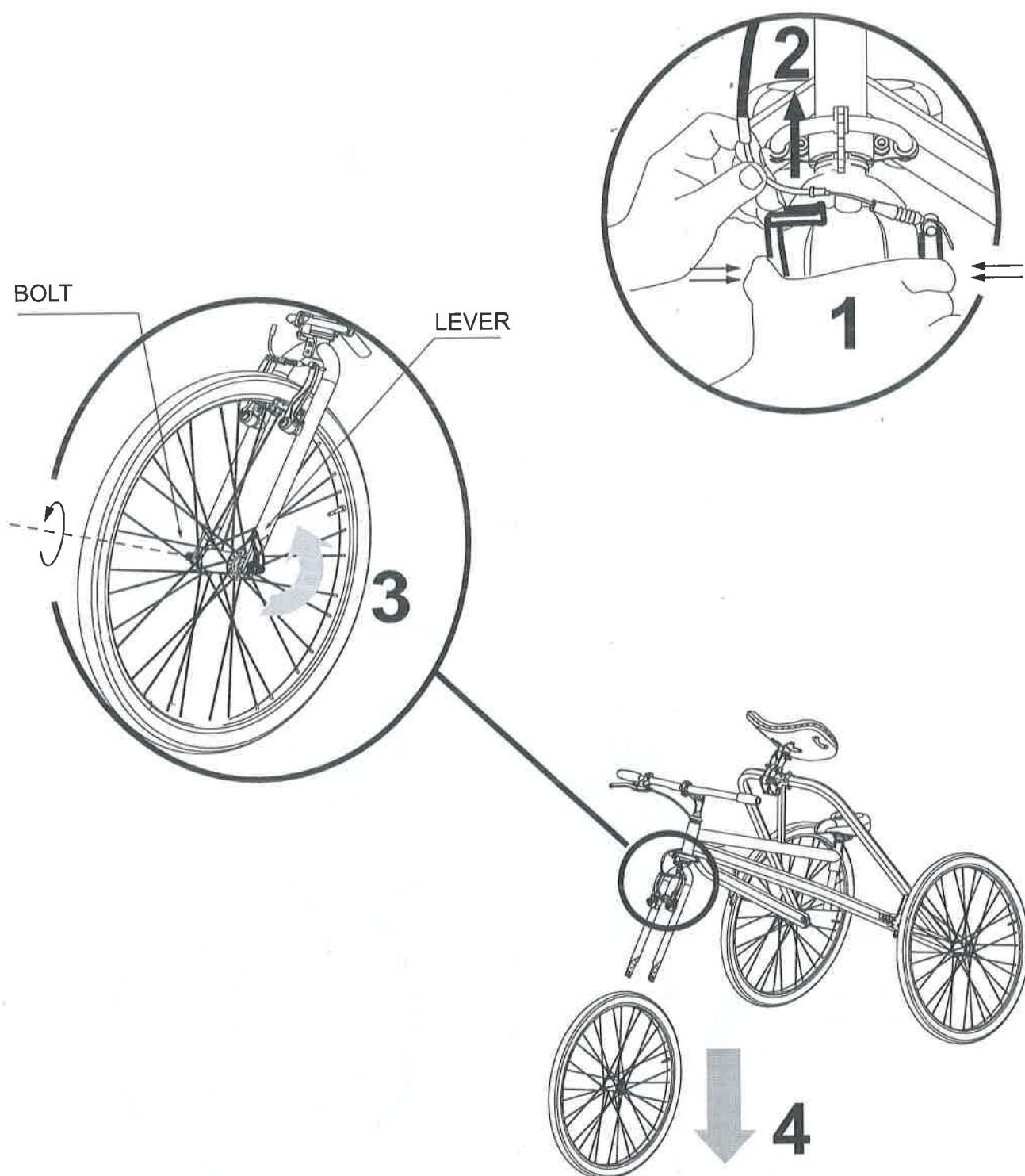



後輪拆卸



- 1) 卸下六角螺絲
- 2) 拆下車輪

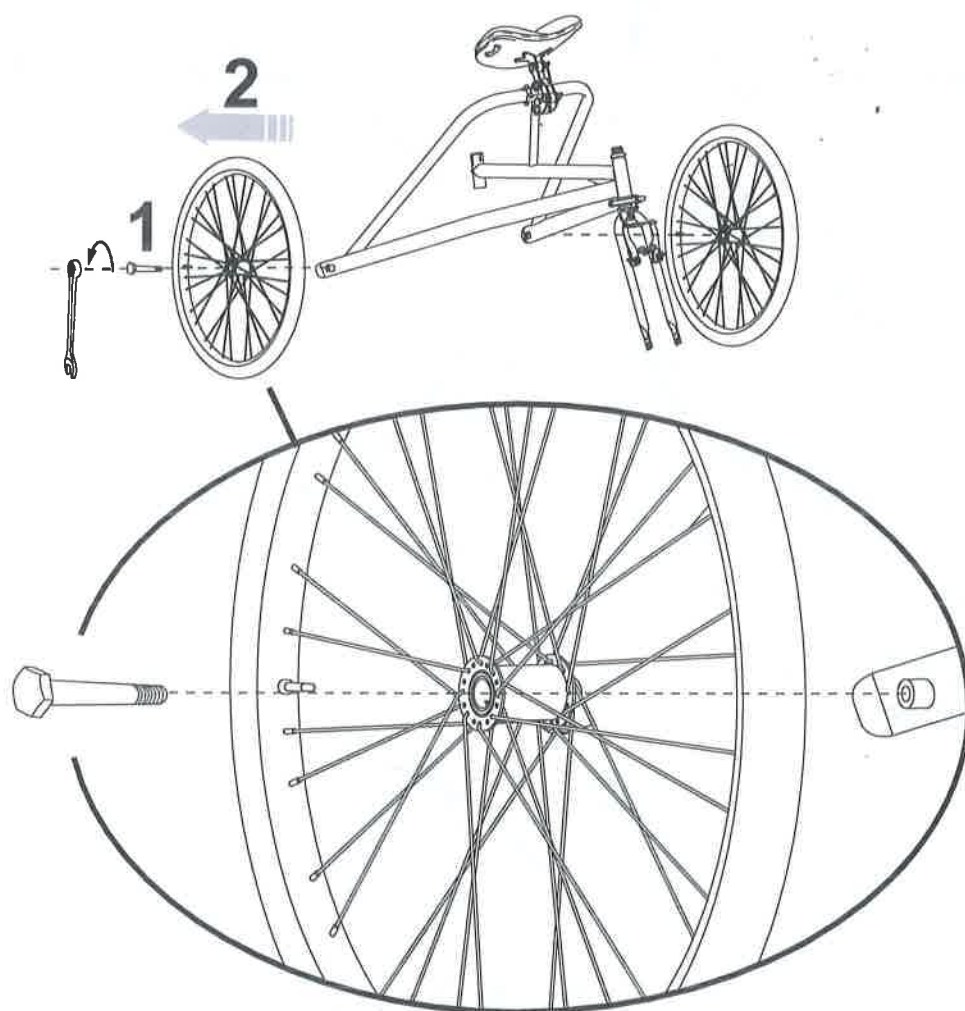




車把手拆卸

- 1) 取下CAP螺絲
- 2) 鬆開螺絲
- 3) 拆下車把並放回CAP螺絲

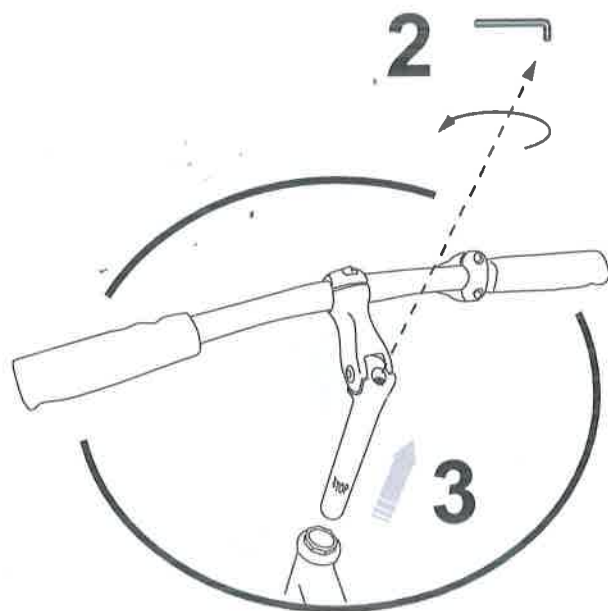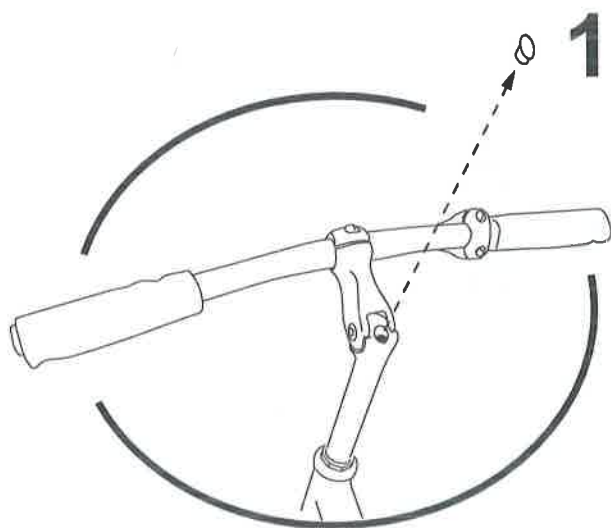

座椅拆卸





- 1) 鬆開螺絲
- 2) 拆下座椅

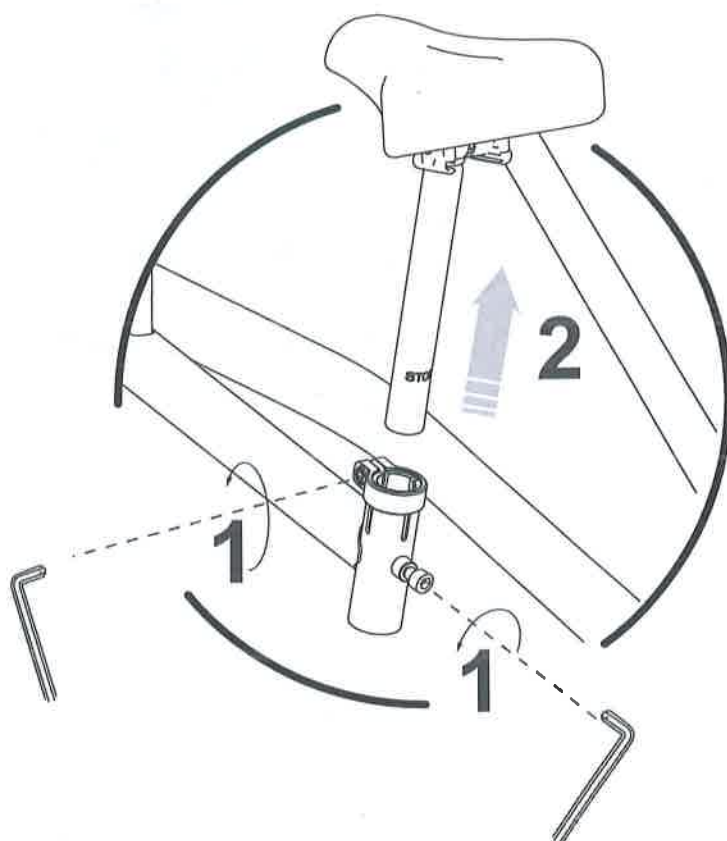



軀幹支撐布套拆卸


- 1) 打開布料標籤
- 2) 拉開拉鍊
- 3) 拆下布套進行清洗

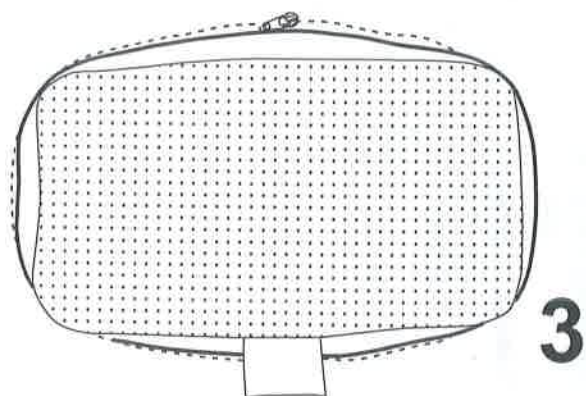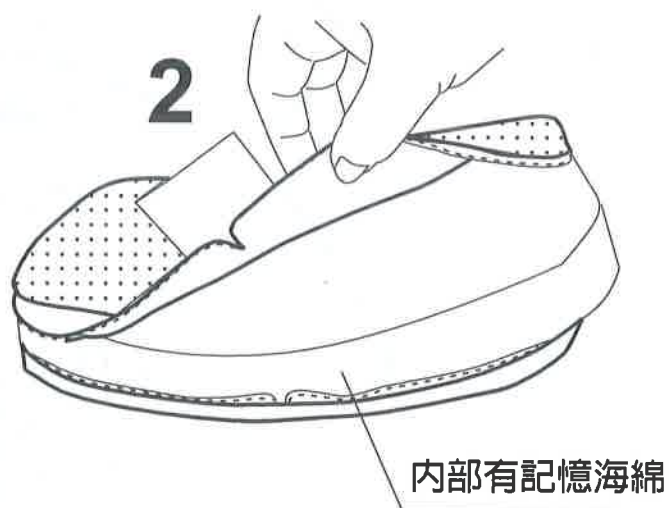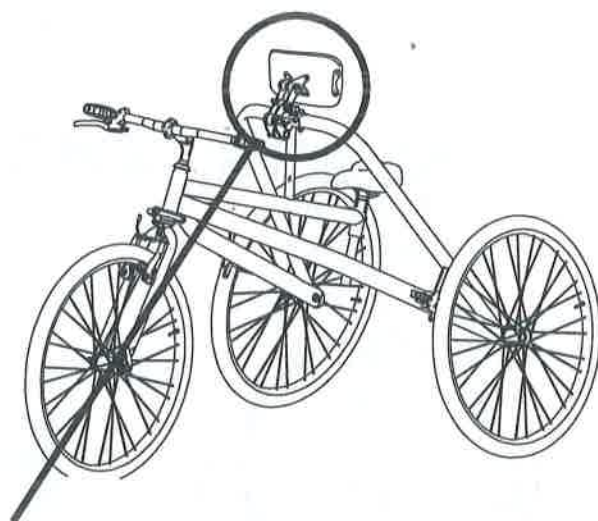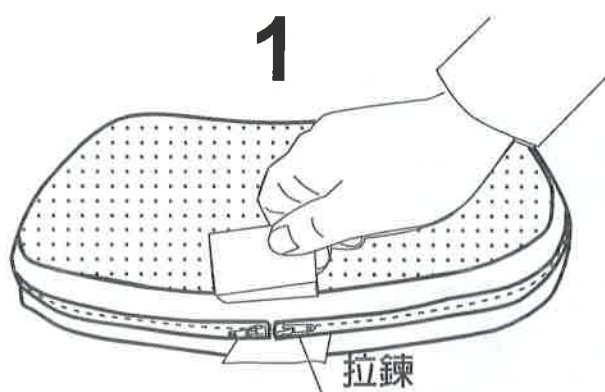



前輪快拆桿

- 1) 打開快拆桿
- 2) 鎖緊或鬆開螺帽來調整固定強度
- 3) 扳回快拆桿

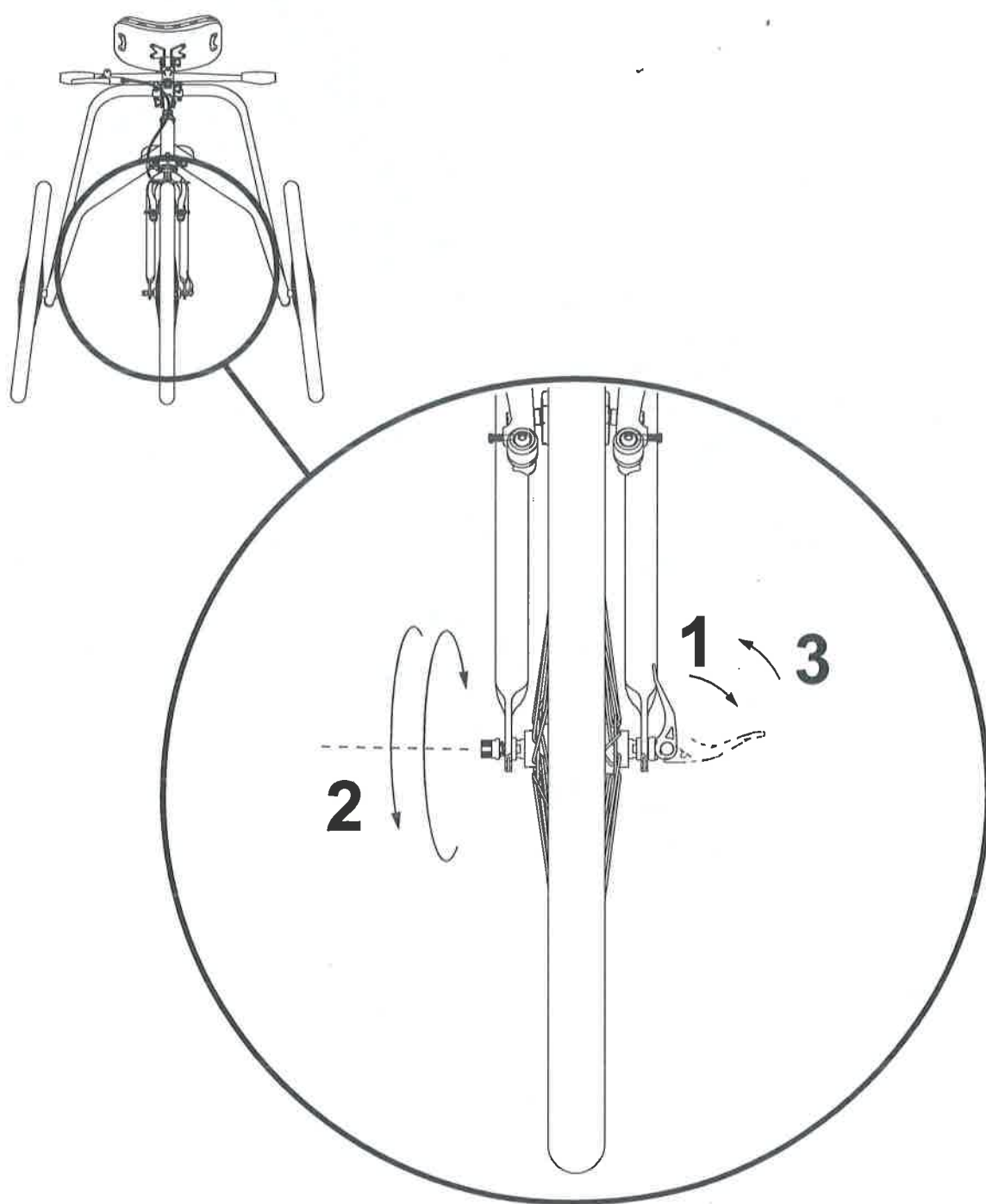

我們

余了
吏用

如果
共幫

高雄

TEL:

:AX

新北

TEL:

:AX

Abk

:m

http

我們建議您仔細閱讀本手冊以了解其內容。

除了幫助您快速熟悉跑步三輪車之外，它還包含有關如何安全地使用並使其保持良好工作狀態的實用技巧。

如果您在閱讀後仍有疑問，請與我們聯繫，我們將很樂意為您提供幫助與服務！



高雄市814仁武區京中三街85號

TEL:+886-7-3515689

FAX:+886-7-3710267

新北市235中和區建八路169號5樓

TEL:+886-2-22212366

FAX:+886-2-22225677

Mobile:+886-929017967

E-mail:sunhochin@pie.com.tw

http://www.sunhochin.com